

/ Beschreibung der 3-matic Software

3-matic ist eine Software von Materialise, welche CAD-Tools mit Vorverarbeitungsfunktionen (Meshing) verbindet. Um dies zu ermöglichen, arbeitet die Software mit triangulierten Oberflächen (STL Dateien), wodurch sie sich für das Erstellen von Freiform-3D-Objekten eignet, wie z. B. die Generierung anatomischer Modelle mittels einer Segmentierung medizinischer Bilddaten (von 3-matic). Somit kann 3-matic als ein Tool betrachtet werden, welches anatomisches CAD oder , Engineering on Anatomy - wie Materialise es nennt - ermöglicht. 3-matic ist in zwei Versionen erhältlich: eine Forschungsversion und eine Medizinversion. Für das Design oder die Herstellung medizinischer Geräte jeglicher Art darf nur die Medizinversion verwendet werden. Die Forschungsversion dient ausschließlich Forschungszwecken.

3-matic kann für den Import anatomischer Daten und anderer 3D-Objekte im STL-Format oder von in zahlreichen anderen Datei-Formaten, einschließlich CATIA, IGES, STEP, usw., verwendet werden. Sobald Ihre Objekte geladen sind, stehen sie Ihnen für verschiedenste „Engineering on Anatomy“-Anwendungen zur Verfügung, so wie beispielsweise Messungen, Planung, Modellierung und 3D-Druck.


Die Module, die in für 3-matic erhältlich sind, ermöglichen Benutzern genaue 3D-Messungen und Analysen, die Konstruktion von ein Implantaten oder chirurgischen Schablonen, oder die Vorbereitung virtueller 3D-Modelle für eine Finite-Elemente-Analyse. Materialise entwickelt auch Software für die additive Fertigung, welche die für die Vorbereitungen Ihrer medizinischen Modelle oder Geräte für jedes 3D-Drucksystem verwendet werden kann. Falls Sie dazu weitere Informationen wünschen, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.

/ Indikationen für die Verwendung

3-matic Medical (nachstehend '3-matic') ist für den Einsatz als Software für die computergestützte Konstruktion und Herstellung medizinischer Exo- und Endo-Prothesen, patientenspezifischer, medizinischer und zahnmedizinischer / kieferorthopädischer Ausstattungen und Dentalrestorationen bestimmt.

/ Warnungen und Empfehlungen

Die 3-matic Software sollte nur von ausgebildeten Fachleuten verwendet werden. Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Teilnahme an einer Schulung durch einen Experten von Materialise. Mit 3-matic generierte Ergebnisse oder Arbeitsresultate, die zur Behandlung oder Diagnose von Patienten dienen, müssen von einem zuständigen Arzt, der diese Ergebnisse gestalteten Objekte bewerten kann, kontrolliert werden. Es liegt in der Verantwortung des Arztes zu beurteilen, ob die mit der 3-matic Software geplante Behandlung durchgeführt werden soll.

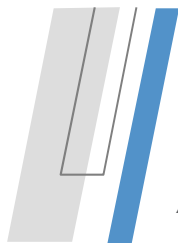

3-matic®

Medizinversion Anweisungen für die Softwarenutzung

Dieses Dokument enthält die grundlegende "Anweisungen für die Nutzung" der 3-matic Software. Genaue Anweisungen finden Sie im "Reference Guide". Englisch ist die in der 3-matic Softwareinterface verwendete Sprache.

Tipps und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte achten Sie darauf, dass die Qualität und die Auflösung Ihrer triangulierten Oberflächen das Ergebnis von Design-oder Analyseoperationen beeinflussen kann. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, dass die Industriestandards eingehalten werden.

Anweisungen für die Softwarenutzung

3-matic starten

Nach der Installation der Software auf Ihrem PC, doppelklicken Sie auf das 3-matic Desktop-Symbol für die **Forschungs-** oder **Medizinversion**. Sie können auch auf die **Schaltfläche Start → Alle Programme → Materialise → 3-matic** klicken. Bitte achten Sie darauf, dass Sie für klinische Anwendungen die Medizinversion auswählen.


Materialise Software wird von einer Lizenz-Schlüssel-Datei geschützt. Wenn Sie 3-matic zum ersten Mal starten oder wenn der Lizenz-Schlüssel abgelaufen ist, öffnet sich der sogenannte Key Request Wizard automatisch, um Sie ~~ihnen~~ bei dem Registrierungsprozess zu unterstützen. Verfügbare Optionen werden im **Reference Guide** erläutert. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Option "**instant activation**" im Key Request Wizard wählen. Dadurch wird Ihre Lizenz-Schlüssel-Datei automatisch erneuert, sobald diese ausläuft. Hierbei wird eine Internetverbindung benötigt*.

Minimale Systemanforderungen

Software	Hardware
Windows Vista – 64bit	Intel Core 2 Duo / AMD X2 AM2 oder gleichwertig
Internet Explorer 6	4 GB RAM
	DirectX 9.0c kompatible Grafikkarte mit 512 MB RAM
	5 GB freier Festplattenspeicher
	Auflösung von 1280x1024

Empfohlene Systemanforderungen

Software	Hardware
Windows 7 - 64bit	Dritte Generation Core i5/i7 oder gleichwertige CPU
Internet Explorer 10	8 GB RAM

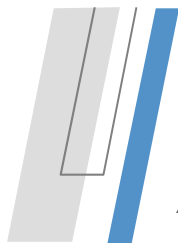

3-matic®

Medizinversion Anweisungen für die Softwarenutzung

Dieses Dokument enthält die grundlegende "Anweisungen für die Nutzung" der 3-matic Software. Genaue Anweisungen finden Sie im "Reference Guide". Englisch ist die in der 3-matic Softwareinterface verwendete Sprache.

	DirectX 10.0 kompatible ATI Radeon/nVidia Geforce Karte mit 1GB RAM
	10 GB freier Festplattenspeicher
	Auflösung von 1680x1050 oder höher

* Weitere Qualifikationen können gelten.

/ Kontaktdaten des Herstellers

Hergestellt in 2015 von:

Materialise NV

Technologielaan 15



B-3001 Leuven

Belgien

Telefon: +32 16 39 66 11

<http://biomedical.materialise.com>

CE 0120 3-matic Medical ist ein CE-gekennzeichnetes Produkt.

© 2015 – Materialise N.V. Alle Rechte vorbehalten.

www.materialise.com

Materialise NV – Technologielaan 15, B-3001 Leuven, Belgium
mimics@materialise.be

L-10265-01

Materialise 
innovators you can count on